



 **BeautiFill**

Made by LipoLife

Teljeskörű megoldás zsírszíváshoz,
bőrfeszítéshez és zsír visszatöltéshez.

RÖVIDEBB KEZELÉSI IDŐ - EGYIDEJŰ LÉZEREZÉS ÉS ZSÍRSZÍVÁS

VISSZATÖLTÉSHEZ SZÜKSÉGES MAGAS ZSÍRSEJT VITALITÁS

HATÉKONY BŐRFESZESÍTÉS

INNOVATÍV, KOMBINÁLT TECHNOLÓGIA

AlmaTM

For You. For Life.



Az Alma Lasers saját szabadalmaival a világ egyik leginnovatívabb lézer, rádiófrekvenciás és ultrahangos termékgyártója.

Termékkínálata lefedi a sebészet és az esztétika területét. Forradalmi újításai, saját fejlesztései mellett nagy hangsúlyt fektet a biztonságra és a komplex kezelési lehetőségek megvalósítására.



BeautiFill az Alma-tól

A BeautiFill az első lézeres zsír visszatöltő készülék. A lézer által végzett zsírsvívás hatékonyabbnak bizonyult a zsírsejt vitalitásának megőrzésében azáltal, hogy nem roncsolja a zsírsejteket, ugyanakkor kevesebb vér és kötőszövet kerül az összegyűjtött zsírszövetbe.

A BeautiFill egyetlen készülék segítségével végzi el a zsírsvívást, bőrfeszítést és zsír visszatöltést, optimalizálva és lerövidítve a teljes folyamatot.

Három az 1-ben kanül



A BeautiFill újítása a körben Mercedes jel formában kivágott kanülbe ágyazott radiális kibocsátású üvegcsál, amely lehetővé teszi a 360°-ban, kis teljesítménysűrűséggel történő lézerfény kibocsátást.

Ennek előnye, hogy az energiát egyenletesen osztja el a kezelendő területen, így gyorsan eltávolítja a zsírsejteket még a nagyobb zsírszövetekből is, ezzel meggyorsítva az eljárást, valamint minimalizálja az égés kockázatát.

A 360°-ban kibocsátott lézerfény a kötőszövetben lévő vizet célozza, így könnyedén leválasztja a zsírsejteket, anélkül hogy azok sérülnének, ezzel biztosítva 95%-nál magasabb zsírsejt vitalitást és ezzel párhuzamosan a bőr egyenletes feszesítését.

Vizsgálatok szerint a BeautiFill jóval nagyobb zsírsejt vitalitást eredményez, mint a manuális zsírsvívás.

A közhiedelemmel ellentétben a zsír visszatöltés sokkal kevesebb időt vesz igénybe, mint a hagyományos zsírsvívás, mert sokkal kisebb mennyiséget, ellenben kiváló minőségű zsírsejteket igényel.

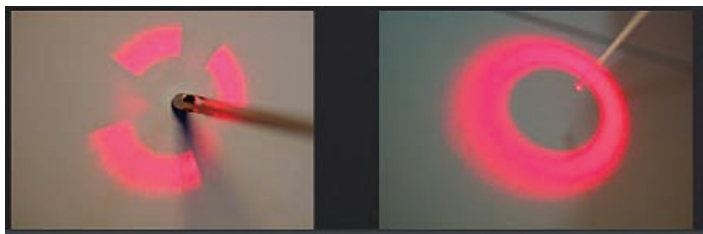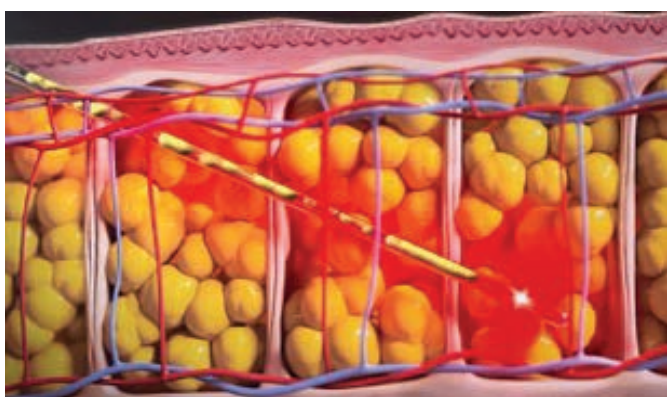

Tökéletes töltőanyag

A szépségiparban egyre nagyobb szerepet tölt be a saját zsírral történő mell- és fenéknagyobbítás, valamint az arcifiataltás.

A saját zsír azonnali elérhetősége és a szervezetbe való természetes integrációja, ill. a tartós eredmények miatt rendkívül kedvelt eljárás.

A BeautiFill 95% fölötti zsírsejt vitalitást ér el a leszívott zsírnál, ezzel tökéletes alternatíváját kínálja a szintetikus töltőanyagoknak.

A zsír visszatöltés rendkívül hatékony lehet azoknál a pácienseknél, akik allergiások vagy érzékenyek az olyan töltőanyagokra, mint a kollagén vagy a Hylaform.

Lézerezés és zsírshívás egyszerre


A BeautiFill kanülbe ágyazott üvegszálának köszönhetően lehetővé teszi, hogy a lézerezés és a zsírshívás párhuzamosan történjen.

Az eszköz segítségével az orvos könnyedén áthalad a kötőszöveteken, ezáltal gyorsan és hatékonyan távolítja el a zsírsejteket.

Mivel a lézer fényenergiáját a kötőszövetek nyelik el, így nem roncsolja olyan mértékben a véredényeket, mint a manuális leszívás. Ez minimalizálja a vérzést, a duzzanatot és az olyan testi traumákat mint pl. a hematómák, ödémák és véraláfutások, valamint csökkenti a kezelés után fellépő fájdalmat.

Lézer

Mechanikus

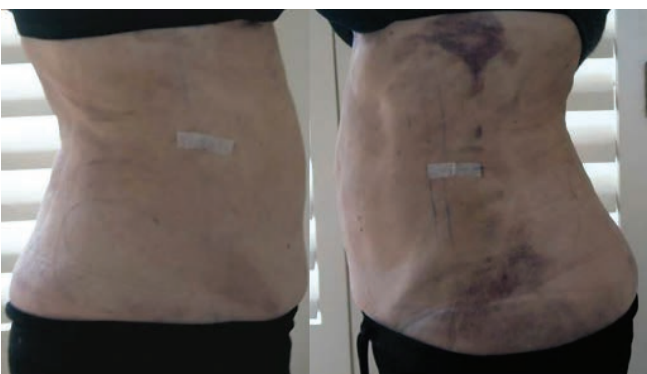

Innovatív technológia

A BeautiFill a léghűtéses lézertechnológiának köszönhetően működés közben sokkal csendesebb mint a vízhűtéses készülékek. Zsírshívás közben nem végez rezgő mozgást.

A készülék a zsírshíváshoz 2 vákuumpumpával, a tumescenszt érzéstelenítő folyadék beviteléhez pedig egy perisztaltikus pumpával rendelkezik.

A felhasználóbarát szoftver lehetővé teszi az eljárás hőmérsékleti határértékének meghatározását. Ha a bőr hőmérséklete meghaladja a határértéket, a rendszer automatikusan leáll, és megakadályozza a termikus szövetkárosodást.



Bőrfeszítés

A hatékony zsírbontás mellett az 1470 nm-es diódlézer által termelt hőenergia összehúzza a meglévő kollagént és serkenti az új kollagénrostok képződését ezáltal feszesítve a bőrt, így lehetővé válik az egyidejű zsírshívás és bőrfeszítés.

Ezen kívül a BeautiFill kínál egy kizárólag bőrfeszítésre alkalmas kanült is, mely különösen fontos az olyan kényes területek kezeléséhez mint az arc, a nyak, valamint a cellulit területe.

Alma



BeautiFill

Made by LipoLife

Előnyök



Teljeskörű megoldás zsír szíváshoz, bőrfeszítéshez és zsír visszatöltéshez



Rövidebb kezelési idő
Gyorsabb befektetés megtérülés



Magas zsírsejt vitalitás. Nincs szükség szintetikus töltőanyagra



Kórházak és magánklinikák számára is megfelelő



Kompakt, helytakarékos, könnyen mozgatható



Teljes felszerelés zsír szíváshoz és visszatöltéshez



Kiváló alternatíva a szintetikus töltőanyagok helyett



Perisztaltikus pumpa a tumescens érzéstelenítő folyadék bevitelhez

Alma Lasers Magyarország

1112 Budapest, Budaörsi út 41.

Tel. (1) 466 5665

info@almalaser.hu

www.almalipolife.com

www.almalasers.hu

© 2019 Alma Lasers, All rights reserved. Alma Lasers, its logo, BeautiFill, LipoLife, Lipo Tight and LipoSense are trademarks or registered trademarks of Alma Lasers in the United States and/or other countries. Product specifications are subject to change without notice.



CONNECT WITH
ALMA LASERS

