

Soprano Titanium

Erősebb, gyorsabb, egyszerűbb

Lézeres szőrtelenítés, Újragondolva.





Bemutakozik a **Soprano Titanium**

A legmodernebb megközelítés a szőrtelenítésben, mely ötvözi a tökéletes eredményeket és a páratlan kényelmet. A 4 cm²-es kezelőfejnek és fejlett kontakt hűtési rendszerének köszönhetően a kezelések gyorsabbak és fájdalommentesek, így a lézer jelentősen jobb megoldást kínál a kezelő és a páciens számára egyaránt. A Soprano Titanium a három kombinált hullámhossz előnyeit kiaknázva javítja a páciensélményt, rendkívül látványos eredményei és rövidebb kezelései pedig gyors megtérülést tesznek lehetővé.

A Soprano Titanium Rendszere



Egyedülállóan nagy kezelőfej

40%-kal gyorsabb!

A Soprano Titanium bemutatja a Quattro 3D kézidarabot, mely egyedülálló 4 cm²-es kezelőfejjel rendelkezik, így egy 600 cm²-es területen is használható. A kézidarab gyorsabbá, fájdalommentessé és kényelmessé teszi a kezeléseket mind a páciens, mind a kezelő részére.



Két csatlakozó

Rugalmasabb, Egyszerűbb!

A Soprano Titanium az első Soprano lézeres szőrtelenítő, mely két csatlakozóval rendelkezik, így lehetővé teszi, hogy egyszerre két kézidarab legyen csatlakoztatva a lézerhez, így rugalmasan és gyorsan válthat kézidarabot kezeléseik közben.



✓ ICEPlus⁺

Kontakt hűtés

Az ICE Plus egy fejlett technológia, mely folyamatos kontakt hűtést tesz lehetővé. A bőr hőmérsékletét a kezelés teljes hossza alatt egy ellenőrzött tartományon belül tartja, így biztosít fájdalommentes és kényelmes szőrtelenítést.

✓ 15' Android Képernyő

Felhasználóbarát és egyszerű

A 15' Android képernyővel felszerelt Titanium előre beállított paramétereivel egyszerű használatot biztosít.





Az **Alma**™ a világ
5 legnagyobb
lézergyártójának
egyike.

Együttműködő Technológiák. Kimagasló Eredmények.

SHR™ technológia

Az SHR™ az Alma szabadalmaztatott szőrtelenítő technológiája. Az egyetlen klinikailag bizonyítottan fájdalommentes szőrtelenítő módszer minden bőrtípusra, beleértve a sötétebb tónusokat és a napbarnított bőrt is. Gyors impulzusainak köszönhetően a lézer fokozatosan melegíti fel és károsítja a szőrtüszőket, miközben megakadályozza a környező szövetek károsodását. Az SHR™ lehetővé teszi a szőrtelenítést az év bármely részében az összes bőrtípuson.

ALEX 755nm

Az Alexandrit hullámhossz a legkülönbézetesebb szőrszálak kezelését teszi lehetővé. Kifejezetten alkalmas a világos és vékony szőrszálak eltávolítására.

SPEED 810nm

A 810nm a klasszikus hullámhossz a lézeres szőrtelenítésben, mellyel biztonsággal kezelhetjük a karok, a lábak, az orca és az áll területét is.

YAG 1064nm


A YAG 1064 az ideális hullámhossz a sötétebb bőrtípusok kezeléséhez. A 1064nm mélyen, közvetlenül a hajhagymában nyelődik el, így alkalmas az olyan kényes területek kezelésére is, mint a hónalj.

3D



Bemutatik a Soprano Titanium exkluzív 3D technológiája, mely a lézeres szőrtelenítéshez legalkalmasabb három hullámhosszt egyesíti egyetlen kézzel, így egyszerre célozza meg a szőrtüszőt különböző anatómiai mélységekben.

A Soprano Titanium a napjainkban elérhető legbiztonságosabb és leghatékonyabb szőrtelenítő megoldás.

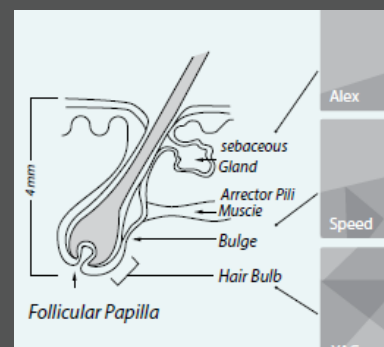

Kézidarabok



4Quattro

3D és 40%-kal gyorsabb!

A Soprano termékcsalád legexkluzívabb kézidarabja, mely 4 cm²-es kezelőfejének és a három hullámhossz kombinációjának köszönhetően jelentősen lerövidíti a kezelési időt. Biztonságos, hatékony, gyors és fájdalommentes kezeléseket tesz lehetővé.



TRIO - 3 az 1-ben

Ezzel a kézidarabbal egyszerre használhatja a lézeres szőrtelenítéshez használt három leghatékonyabb hullámhosszt. 2cm²-es kezelőfeje különböző anatómiai mélységekben melegíti fel a szőrtüszőket, így biztosítva hatékony kezeléseket.



SPEED™ 810 - Gyorsabban!

Végezzen el több kezelést rövidebb idő alatt ezzel a nagy kezelőfejjel rendelkező kézidarabbal! Gyorsabban kezelhet vele nagy területeket anélkül, hogy lemondana a biztonságról vagy a hatékonyságról.



DIODE LASER ALEX 755nm

Nagy teljesítményű 755 nm-es kézidarab, mely alkalmas a világos és vékony szőrszálak kezelésére is.



COMPACT 810

Ergonomikus és könnyű kézidarab kisebb területek kezeléséhez.



ARCKEZELŐ HEGY

A nehezen elérhető területek mint a fül vagy az orr kezeléséhez.



DIODE LASER YAG 1064

A YAG 1064 az ND: YAG hullámhosszt használva lehetővé teszi a sötétebb bőrszínnel rendelkező páciensek kezelését.



ELDOBHATÓ HIGIÉNIKUS VÉDŐ

10 db-os csomagban kapható higiénikus védő az intim területek kezeléséhez.

Soprano Titanium

Lézeres szőrtelenítés, Újragondolva.

Alma
For You. For Life.



4 cm² -ES KEZELŐFEJ



ICE PLUS™ KONTAKT HŰTÉS



KÉT CSATLAKOZÓ



SMART CLINIC



KLINIKAILAG BIZONYÍTOTT 3D TECHNOLÓGIA



FELHASZNÁLÓBARÁT NAGY KÉPERNYŐ
ELŐRE BEÁLLÍTOTT PARAMÉTEREK



MINDEN BŐRTÍPUSRA, NAPBARNÍTOTT BŐRRE IS



NEM HASZNÁL DRÁGA FOGYÓANYAGOT

**Alma Lasers
Magyarország**

1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel. (1) 466 5665

Email: info@almalaser.hu

www.almalasers.hu

© 2019 Alma. All rights reserved. Alma, its logo, Soprano Titanium, Quattro, ICE Plus, Smart Clinic, SHR & Speed are trademarks and/or registered trademarks of Alma in the United States and/or other countries.

PBSP28111801



CONNECT WITH
ALMA LASERS

